



**Busch**<sup>®</sup>

There is no substitute for quality

# KERA

## Ganz in Weiß! All in white!

Acht neue filigrane Formen aus **Vollkeramik** ergänzen die bestehende KERA-Serie; für sanfte Behandlung und präziseste Gestaltung bei optimaler Übersicht.

Die spezielle weiße Hochleistungskeramik; ein HighTech Material für rotierende Instrumente der BUSCH Premium Klasse.

The existing KERA range has been complemented by eight new filigree shapes **entirely made of ceramic**; for gentle treatment and precise shaping with an optimum overview.

The special white high-performance ceramic; a high-tech material for premium class rotary tools from BUSCH.



**New!**





Dieser ästhetische Werkstoff besticht durch eine hervorragende Bruchzähigkeit und Härte, die mit den bewährten BUSCH Verzahnungen ausgestattet zu den typischen attraktiven Behandlungsergebnissen führt. Das bis zu 25% bzw. 60% geringere Eigengewicht der bei KERA Fräsern verwendeten Hochleistungskeramik ermöglicht ein sanfteres Fräsen, was bei der Behandlung von erkrankten Naturnägeln oder auch Kunstnägeln für Patient und Anwender spürbar sein kann. Patienten mit ausgeprägter Metall-Allergie wird das Plus an Biokompatibilität entgegenkommen. Die KERA Fräser sind selbstverständlich Medizinprodukte und für die zugelassenen Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen geeignet.

This aesthetic material stands out through its excellent fracture toughness and hardness which, in combination with the proven BUSCH cuts, yields the typical attractive results.

The high-performance ceramic material used for KERA cutters is up to 25% respectively up to 60% lighter, thus permitting more gentle cutting – a tangible advantage for both patient and user when treating diseased natural nails as well as artificial nails.



Patients who are highly allergic to metals welcome the additional bio-compatibility. Naturally, KERA cutters are medical products and suitable for all approved disinfection and sterilization methods.

**SPEED-Verzahnung,**  
mit passiver Sicherheit,  
empfehlenswert für Diabetiker

- für verdickte Nägel
- universell einsetzbar
- mit passiver Sicherheit für Gel und Acryl

**SPEED-cut,**  
with passive safety,  
recommended for diabetic patients


- for thick nails, suitable for universal use
- with passive safety for gel and acrylic

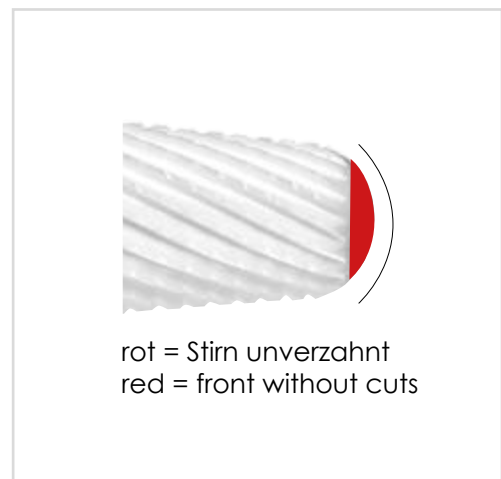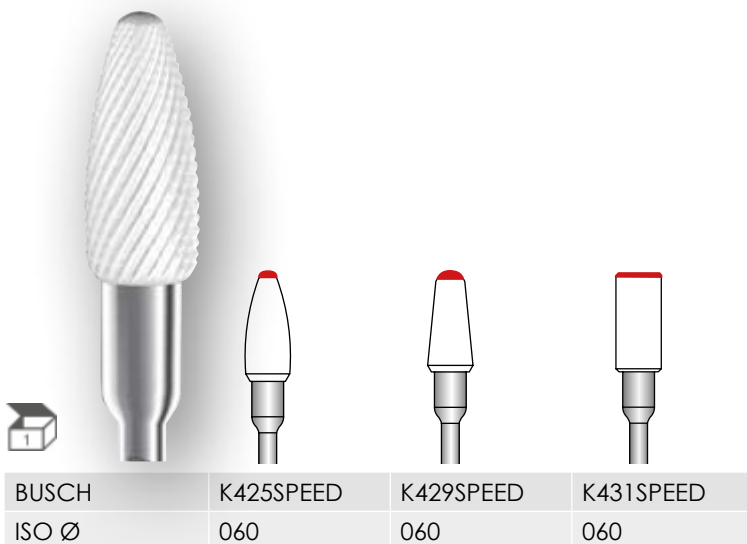

## X-Verzahnung

mit hoher Abtragsleistung


- für eine gezielte Konturierung formveränderter oder mykotischer Nägel
- mit hoher Abtragsleistung für Gel

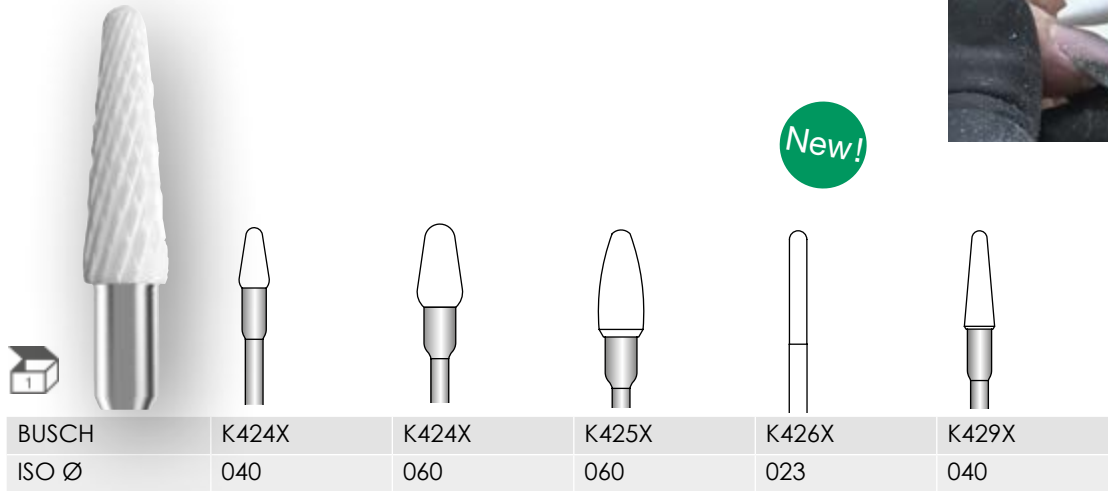

## X-cut


with high abrasion performance

- for specific outlining of misshapen or fungal nails
- with high abrasion performance for gel

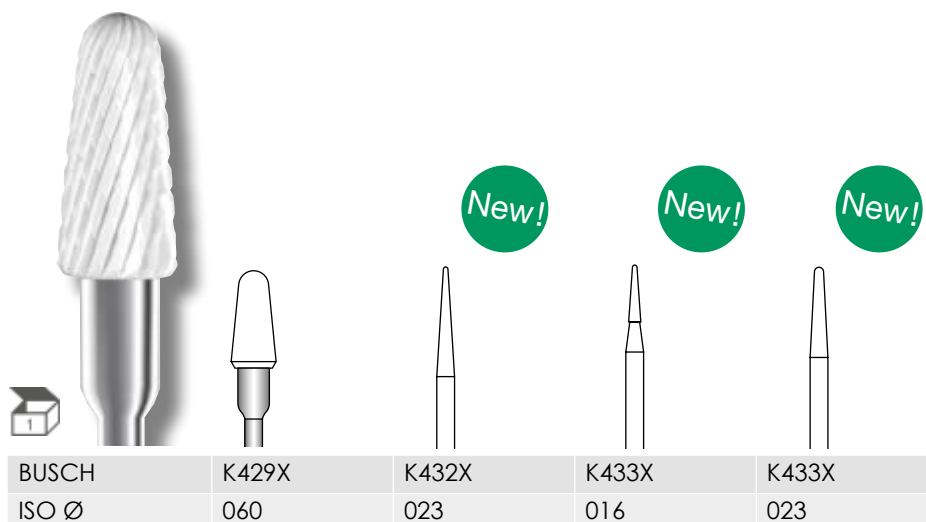

## feine X-Verzahnung

- für Feinbearbeitung vorbehandelter Nägel und Nagelhaut

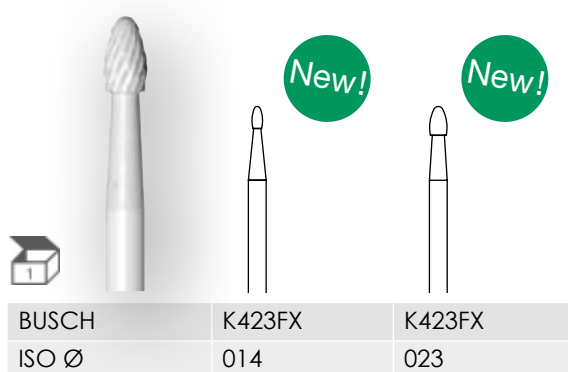

## fine X-cut

- for delicate treatment of pretreated nails and cuticle








### grobe gerade Verzahnung mit Querhieb

- für grypotisch verdickte Nägel und das zügige Ausfräsen von Orthesen-kunststoffen
- mit sehr hoher Abtragsleistung für Acryl
- kleine Formen speziell für schwer zugängliche Stellen an Nagelhaut und Nagelfalz sowie unter dem Nagelrand.
- für punktuelle starke Verhornungen auch im Zehenzwischenbereich

### coarse straight cut with cross cut

- for thick gryphotic nails and rapid removal of orthesis silicone
- with very high abrasion performance for acrylic
- small shapes specifically for hard-to-reach areas on the cuticles and nail folds, as well as under the edge of the nail.
- for areas with very thick callus including the area between the toes

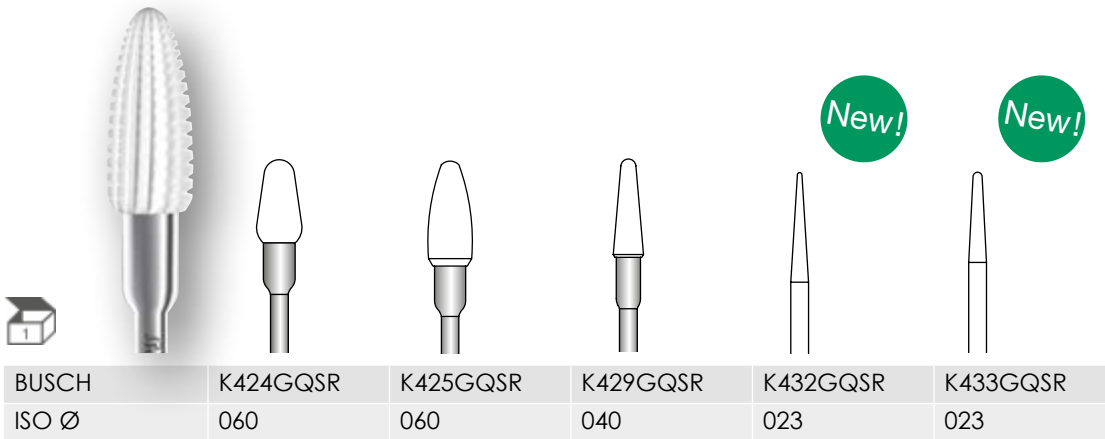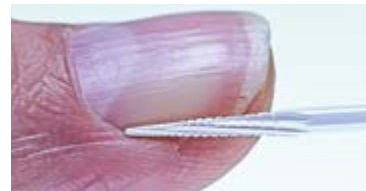

 = Verpackungseinheit / packing unit

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter [www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website [www.busch.eu](http://www.busch.eu)

**CE** 0124



**BUSCH & CO.** SmbH & Co.KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

[www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
[mail@busch.eu](mailto:mail@busch.eu)  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/012022